

Przed założeniem końcówki mieszającej należy sprawdzić oba otwory strzykawki, aby upewnić się, że pasty są na tym samym poziomie lub upuścić niewielką ilość pasty, aby zapewnić równomierny wypływ ze strzykawki.

Kiedy należy stosować G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER?

1	Adherent	Preparacja retencyjna
	Metal, cyrkon, ceramika, Fiber Post	✗
	Ceramika hybrydowa, kompozyt	✓

2	Adherent	Preparacja nieretencyjna
	Metal, cyrkon, ceramika, Fiber Post	✓
	Ceramika hybrydowa, kompozyt	✓

Kiedy należy stosować G-Multi PRIMER?

Adherent	G-Multi PRIMER
Metal Cyrkon	✗
Ceramika, Fiber Post, ceramika hybrydowa, kompozyt	✓

TECHNIKA CEMENTOWANIA dla wkładów z metalu, ceramiki, włókna szklanego i lanych wkładów koronowo korzeniowych



1. Oczyszczyć i splukać miejsce pod wkład, a następnie dokładnie osuszyć używając papierowych sączków. Nie używać H₂O₂ i/lub EDTA do chemicznego czyszczenia przestrzeni na wkład.



2. **Jeżeli wymagana jest dodatkowa adhezja**, nałożyć G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, odczekać 10 sekund i osuszyć przy użyciu MAKSYMALNIE sprężonego powietrza, aż roztwór primera nie będzie już wypływał na zewnątrz wejścia do kanału korzeniowego. Usunąć nadmiar roztworu primera za pomocą papierowych sączków.

Opcjonalnie



3. Przygotować wkład/wkład lany zgodnie z instrukcją producenta.



4. Wycisnąć materiał bezpośrednio do kanału przygotowanego pod wkład. Bezpośrednio po tym wprowadzić do kanału wkład w ciągu 1 minuty od nałożenia cementu.



5. Kontynuować utrzymywanie umiarkowanego nacisku, upewniając się, że wkład pozostaje na swoim miejscu i usunąć nadmiar cementu.



6. Utrzymując umiarkowany nacisk, utwardzić światłem wszystkie powierzchnie/krawędzie brzeżne.



7. Pozostawić materiał na 4 minuty do związania.

Czas naświetlania

LED o wysokiej mocy (ponad 1200 mW/cm ²)	10 sekund
Halogen / LED (700-1200 mW/cm ²)	20 sekund


TECHNIKA CEMENTOWANIA dla wszystkich wkładów, nakładów, koron, mostów i licówek



1. Oczyszczyć, spłukać i dokładnie osuszyć przygotowany ząb.



2. **Jeżeli wymagana jest dodatkowa adhezja**, nałożyć G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, odczekać 10 sekund i osuszyć przy użyciu **MAKSYMALNIE** sprężonego powietrza, przez 5 sekund, aby zapobiec gromadzeniu się płynu w rowku dziąsłowym.

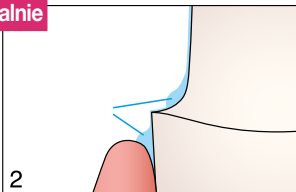

3. Przygotować uzupełnienie zgodnie z instrukcją producenta.



4. Umieścić końcówkę mieszającą i wycisnąć materiał bezpośrednio do uzupełnienia.



5. Natychmiast osadzić i utrzymywać umiarkowany nacisk. Czas pracy wynosi 2'45" przy 23°C.



6A. Utwardzać przez przesuwanie światłowodu lampy utwardzającej nad nadmiarem cementu przez 1 sekundę, aż do uzyskania gumowej konsystencji.



6B. Utrzymywać umiarkowany nacisk, aż do uzyskania jednolitej gumowej konsystencji.



7. Usunąć nadmiar cementu przy zachowaniu umiarkowanego nacisku.



8A. Utrzymując umiarkowany nacisk, utwardzić światłem wszystkie powierzchnie/krawędzie brzeżne.



8B. Pozostawić materiał do związania na 4 minuty w przypadku, gdy uzupełnienie nie przepuszcza światła.

Czas naświetlania

LED o wysokiej mocy (ponad 1200 mW/cm ²)	10 sekund
Halogen / LED (700-1200 mW/cm ²)	20 sekund



Zapoznaj się z instrukcją użytkowania

▶ W przewodniku GC Luting Guide znajdziesz instrukcje krok po kroku dla wszystkich procedur cementowania

