

everX Flow™

Wzmocniony krótkimi włóknami kompozyt
płynny do odbudowy zębiny

Absolutnie stabilna struktura



everX Flow z GC

Absolutnie stabilna struktura


Odkryj **everX Flow**, wzmocniony krótkimi włóknami kompozyt płynny, który **zastąpi zębinę i wzmocni uzupełnienia**. Zgodnie z tą samą zasadą co żelazne zbrojenie w budownictwie, włókna szklane w everX Flow zwiększają wytrzymałość odbudowy i **zapobiegają jej pękaniu**.

Dzięki łatwej aplikacji, dwóm odcieniom i niesamowitej wytrzymałości, everX Flow wkrótce stanie się **Twoim nowym ulubionym produktem do wszystkich uzupełnień potrzebujących mocnego fundamentu**, jak również **preparacji wymagających odbudowy zrębu korony**.



Wyższa odporność na pękanie dla trwałych rozległych odbudów

Większość kompozytów oferuje optymalne właściwości jako substytut szkliwa: wysoką odporność na ścieranie i estetykę. Jednak nie są one w stanie dorównać zębinie pod względem odporności na pękanie. everX Flow rozwiązuje ten problem i ma **doskonałą odporność na pękanie zbliżoną do wytrzymałości zębiny** dzięki **dużej ilości krótkich włókien** silnie związanych z matrycą żywicy. Umożliwia to materiałowi **skuteczne wzmocnienie dużych uzupełnień w odcinku bocznym**, w połączeniu z konwencjonalnym kompozytem jako warstwę szkliwa.

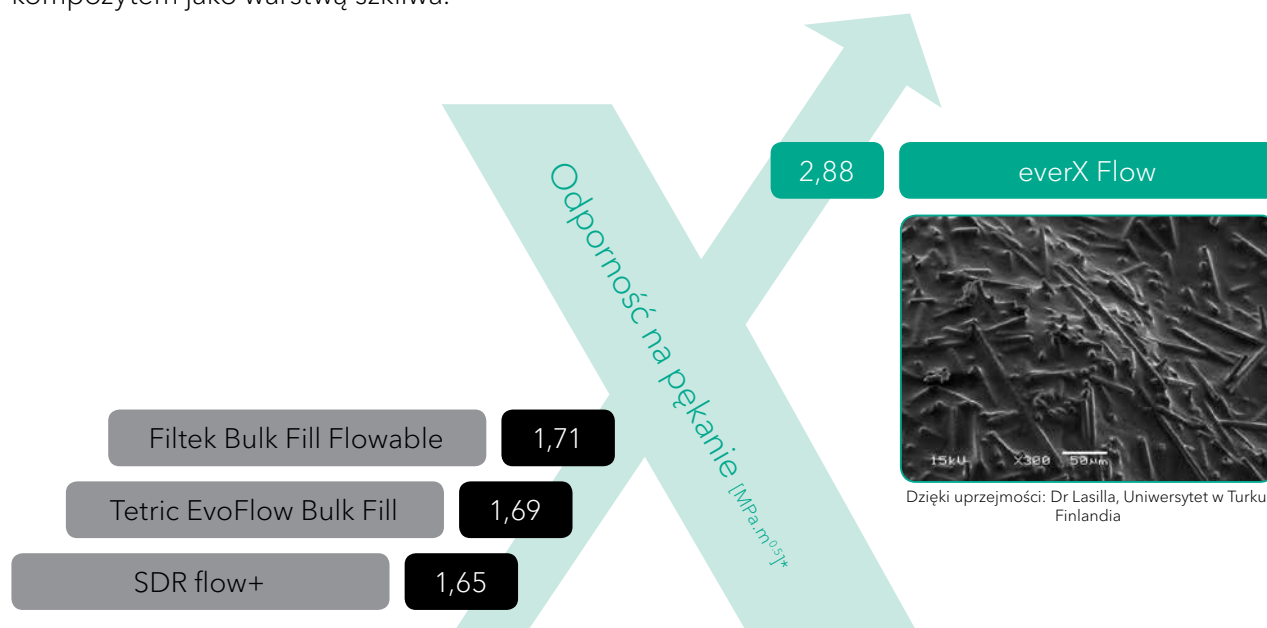

* Źródło: GCC R&D - Dane dostępne na życzenie.
Test przeprowadzono zgodnie z ASTM E399-90 (1997).


Idealna tiksotropia dla łatwego umieszczania i doskonałej adaptacji



Dzięki uprzejmości:
Dr Javier Tapia Guadix, Hiszpania

Dzięki optymalnym właściwościom tiksotropowym everX Flow łatwo **dostosowuje się do każdej preparacji** i pomaga **zapobiec porowatości**.

A jego kontrolowana płynność umożliwia też umieszczanie go w górnych zębach trzonowych **bez efektu spływania**.

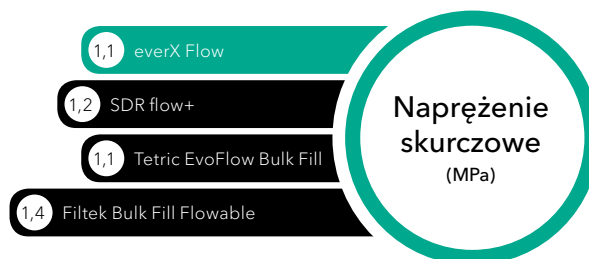

Źródło: GCC R&D - Dane dostępne na życzenie.

Dwa odcienie, aby sprostać wszystkim wymaganiom

Odcień Bulk

Głębokość utwardzania 5,5 mm

Optymalny do **głębokich ubytków w zębach bocznych**

Odcień Dentin

Głębokość utwardzania 2,0 mm

Optymalny dla uzyskania **bardziej estetycznych rezultatów** i do **odbudowy zrębu korony**

Optymalny do wzmocnienia rozległych ubytków i długotrwałych rezultatów estetycznych



Preparacja ubytku



Aplikacja **everX Flow** (odcień Dentin)



Ostatnia warstwa z **Essentia** (odcień Universal)



Sytuacja po zabiegu

Dzięki uprzejmości:
Georg Benjamin, Niemcy



Preparacja ubytku



Aplikacja **everX Flow** (odcień Bulk)



Ostatnia warstwa z **G-aenial Universal Injectable** (odcień A3)



Sytuacja po zabiegu

Dzięki uprzejmości:
Dr Lucile Dahan, Francja

everX Flow z GC

Absolutnie stabilna struktura



Odcień Bulk
do głębokich ubytków

Odcień Dentin
do wysoce estetycznych rezultatów



Preparacja ubytku



W przypadku ubytku klasy II, odbudowa brakujących ścian konwencjonalnym kompozytem



Wypełnienie ubytku z everX Flow



Rezultat końcowy po pokryciu konwencjonalnym kompozytem

everX Flow

10001490	everX Flow, Strzykawka 2 ml (3,7 g) Bulk
10001491	everX Flow, Strzykawka 2 ml (3,7 g) Dentin

Odkryj również



G-Premio BOND
Uniwersalny środek wiążący



G-aenial Universal Injectable
Wysokowytrzymały materiał
odtwórczy do wstrzykiwania



Essentia Universal
Uniwersalny kompozyt
o konsystencji pasty

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND i G-aenial Universal Injectable są znakami towarowymi GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ i Tetric EvoFlow Bulk Fill nie są znakami towarowymi GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. W. Tetmajera 65D/2
PL- 31-352 Kraków
Tel. +48 12 425 14 74
info.poland@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>